


В/в введение лекарственного препарата: в/в струйное введение

Дополнительную
информацию
см. в буклете
«Руководство
по инфузионной
терапии».

Данная информация не заменяет
собой профессиональные
рекомендации. Всегда следуйте
рекомендациям вашего врача,
медсестры или фармацевта.

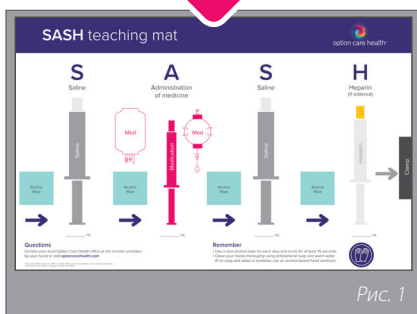

Подготовка

- Достаньте лекарственный препарат из холодильника как минимум за ____ (минут/часов) до использования. Ознакомьтесь с представленными на этикетке инструкциями о том, когда нужно извлекать препарат из холодильника.
- **НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ** не ускоряйте процесс нагрева путем подогревания препарата или с помощью микроволновой печи
- Используйте чистую рабочую область
- Тщательно вымойте руки, используя антибактериальное мыло и теплую воду (если мыла и воды нет, используйте спиртовой антисептик для рук)
- Вытрите руки чистым полотенцем

1 | Подготовьте необходимые принадлежности и клеенку SASH в соответствии с указаниями:


- A. Клеенка SASH (см. рис. 1)
- B. Шприц для в/в препарата
- C. Промывочные шприцы
 - _____ мл солевого раствора
 - _____ мл гепаринового раствора _____ ед./мл гепаринового раствора
- D. Спиртовые салфетки
- E. Контейнер для острых предметов (при необходимости) и (или) контейнер для мусора

2 | Проверьте шприц для препарата

Проверьте каждый шприц для препарата. Проверьте этикетку на шприце (см. рис. 2) и удостоверьтесь в следующем:

- A. Правильные имя и фамилия пациента
- B. Правильное название препарата
- C. Объем / количество препарата
- D. Время, необходимое для выдержки препарата при комнатной температуре
- E. Срок годности препарата

Каждый флакон с препаратом не должен иметь трещин, протечек, плавающих частиц или изменения цвета. В случае выявления проблем с шприцем для препарата или неправильных этикеток позвоните медсестре или фармацевту.

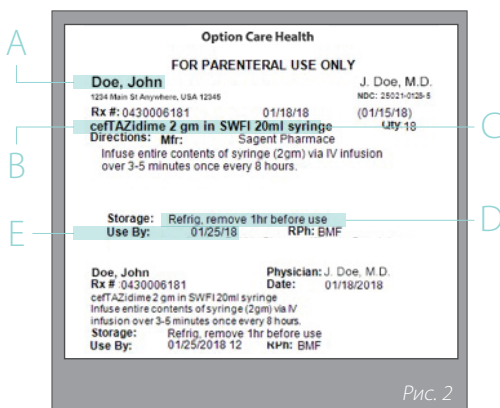

Для демонстрационных целей. Соблюдайте
указания на ВАШЕМ шприце для
лекарственного препарата.



Рис. 3

3 | Приготовьте промывочные шприцы

- A.** Перед использованием шприца с усилием надавливайте на него большим пальцем (при этом колпачок наконечника должен быть закрыт) до тех пор, пока не почувствуете, что плунжер движется.
- B.** Выпустите воздух и излишек раствора, повернув колпачок наконечника и выдвинув плунжер вперед. Выдавите лишний раствор, чтобы в шприце осталось количество в соответствии с указаниями медсестры. (См. рис. 3)
- C.** Установите колпачок наконечника обратно, не прикасаясь к наконечнику рукой. Если вы прикоснетесь к нему, вам нужно будет начать все заново, используя чистый шприц. Отложите шприц в сторону до тех пор, пока вы не будете готовы к его использованию.
- D.** Повторите процедуру для всех промывочных шприцев, необходимых для введения дозы.



Рис. 4

4 | Промойте систему для в/в введения солевым раствором

Использование одного из подготовленных промывочных шприцев с солевым раствором из шага 3.


- A.** Протирайте безыгольное соединительное устройство на в/в катетере спиртовой салфеткой не менее **15 СЕКУНД**, а затем высушите его на воздухе. (См. рис. 4)
- B.** Снимите защитный колпачок с промывочного шприца с солевым раствором. **НЕ** прикасайтесь к кончику шприца после удаления колпачка.

Утилизируйте промывочный шприц с солевым раствором, если стерильный наконечник без колпачка коснется к каким-либо неочищенным поверхностям.



Рис. 5

- C.** Подсоедините промывочный шприц с солевым раствором к безыгольному соединительному устройству на в/в катетере путем надавливания и движения по часовой стрелке до полного соединения. (См. рис. 5)
- D.** Откройте зажим на в/в катетере и (или) в/в наборе для удлинения, если указано.
- E.** Промойте в/в катетер, используя метод «надавливание / пауза». **НЕ** пытайтесь промывать катетер при наличии сопротивления, позвоните медсестре или фармацевту.
 - _____ мл солевого раствора
- F.** Отсоедините или утилизируйте промывочный шприц с солевым раствором в контейнер для мусора.

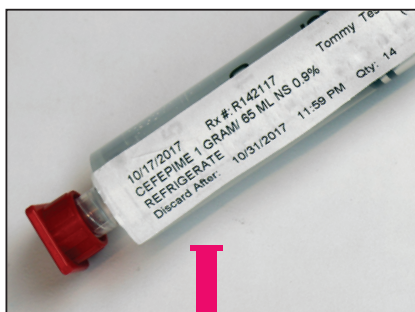

Препарат

5 | Введите лекарственный препарат

- A. Протирайте безыгольное соединительное устройство на в/в катетере спиртовой салфеткой не менее **15 СЕКУНД**, а затем высушите его на воздухе. (См. рис. 4)
- B. Снимите защитный колпачок со шприца для лекарственного препарата.
- C. Плотно подсоедините шприц для препарата к безыгольному соединительному устройству на в/в катетере путем надавливания и движения по часовой стрелке до полного соединения. (См. рис. 5)
- D. Вводите препарат в течение _____ **МИНУТ** в соответствии с указаниями медсестры и как указано на этикетке препарата.
- E. Отсоедините шприц для препарата после введения назначенной дозы и утилизируйте шприц в соответствии с указаниями.

6 | Промойте систему для в/в введения солевым раствором

Использование одного из подготовленных промывочных шприцев с солевым раствором из шага 3.

- A. Протирайте безыгольное соединительное устройство на в/в катетере спиртовой салфеткой не менее **15 СЕКУНД**, а затем высушите его на воздухе. (См. рис. 4)
- B. Снимите защитный колпачок с промывочного шприца с солевым раствором.
НЕ прикасайтесь к кончику шприца после удаления колпачка.

Утилизируйте промывочный шприц с солевым раствором, если стерильный наконечник без колпачка коснется к каким-либо неочищенным поверхностям.

- C. Подсоедините промывочный шприц с солевым раствором к безыгольному соединительному устройству на в/в катетере путем надавливания и движения по часовой стрелке до полного соединения. (См. рис. 5)
- D. Промойте в/в катетер, используя метод «надавливание / пауза».
НЕ пытайтесь промывать катетер при наличии сопротивления, позвоните медсестре или фармацевту.
 - _____ мл солевого раствора
- E. Закройте фиксатор на в/в катетере и/или в/в наборе для удлинения, если вас не проинструктировали использовать гепариновый раствор.
- F. Отсоедините и выбросьте промывочный шприц с солевым раствором в контейнер для мусора.

7 | Промойте систему для в/в введения гепариновым раствором (если предписано)

Использование одного из подготовленных промывочных шприцев с гепариновым раствором из шага 3.

- A.** Протирайте безыгольное соединительное устройство на в/в катетере спиртовой салфеткой не менее **15 СЕКУНД**, а затем высушите его на воздухе. (См. рис. 4)
- B.** Снимите защитный колпачок с промывочного шприца с гепариновым раствором.
НЕ прикасайтесь к кончику шприца после удаления колпачка.

Утилизируйте промывочные шприцы с гепариновым раствором, если стерильный наконечник без колпачка коснется к каким-либо неочищенным поверхностям.

- C.** Подсоедините промывочный шприц с гепариновым раствором к безыгольному соединительному устройству на в/в катетере путем надавливания и движения по часовой стрелке до полного соединения. (См. рис. 5)
- D.** Промойте в/в катетер, используя метод «надавливание / пауза».
НЕ пытайтесь промывать катетер при наличии сопротивления, позвоните медсестре или фармацевту.
 - _____ мл гепаринового раствора _____ ед./мл гепаринового раствора
- E.** Защелкните клипсу на в/в катетере и/или в/в наборе для удлинения, если это указано.
- F.** Отсоедините или выбросьте промывочный шприц с гепариновым раствором в контейнер для мусора.

С вопросами или проблемами обращайтесь к медсестре или врачу



Коллектив Option Care готов помочь по телефону 24 часа в сутки без выходных.

Чтобы посмотреть видеоинструкции или получить доступ к дополнительным ресурсам, посетите сайт optioncarehealth.com/education.

Краткий обзор процедуры (SASH):

- Промойте систему для в/в введения _____ мл солевого раствора (**S**)
- Вводите препарат (**A**) в течение _____ минут
- Промойте _____ мл солевого раствора (**S**)
- Промойте _____ мл гепаринового раствора (**H**), если предписано

