

施用 IV 靜脈輸注藥物： 彈性體

本資訊目的
非取代專業建議。
因此，請遵照醫師、
護士或藥劑師的建議。

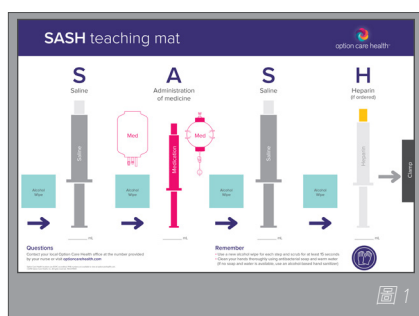


圖 1

使用前

- 請查閱藥物標籤的說明，瞭解何時從雪櫃取出藥物
- 切勿以加熱或微波方式加速藥物回溫過程
- 使用清潔的工作區域
- 使用肥皂和溫水徹底清潔雙手至少 20 秒
(如果沒有肥皂和水，請使用含酒精的手部滅菌劑)
- 用乾淨的毛巾擦乾雙手

1 | 按指示準備用品並準備 SASH 墊：

- A. SASH 墊 (參閱圖 1)
- B. IV 靜脈輸注藥球
- C. (2) 個生理鹽水沖洗注射器
- D. (1) 個肝素沖洗注射器 (如有醫囑)
- E. 酒精擦拭布
- F. 尖銳物品容器和/或垃圾桶

2 | 檢查藥球

查看藥球標籤 (參閱圖 2) 並核實：

- A. 患者姓名正確
- B. 藥物名稱正確
- C. 藥物容量/數量
- D. 藥物回到室溫需要的時間
- E. 藥物的「棄置日期」

藥球應沒有裂縫、漏洩、懸浮顆粒或變色。如果藥球有問題或標籤的任何內容不正確，請致電您的護士或藥劑師。


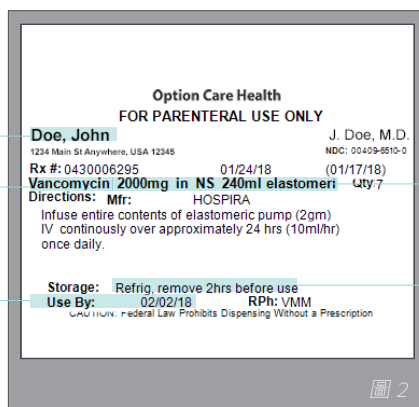


圖 2

為便於示範，請遵照您的藥球說明。

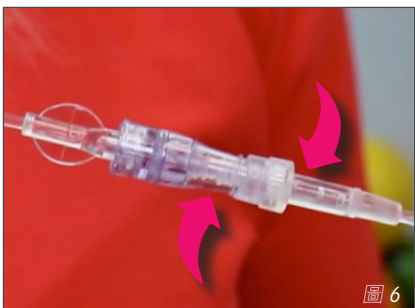

3 | 用生理鹽水沖洗 IV 靜脈輸注管

- A. 用酒精擦拭布擦拭 IV 靜脈輸注導管的無針接頭至少 15 秒，然後風乾。(參閱圖 3)
- B. 推動生理鹽水沖洗注射器的柱塞以打開封口。
- C. 取下生理鹽水沖洗注射器的保護蓋。
請勿在取下蓋子後觸碰注射器頭。

如果生理鹽水沖洗注射器的無菌頭在未蓋蓋子的情況觸碰任何不乾淨的表面，請棄置此注射器。

- D. 豎起注射器，輕推柱塞以排出注射器的空氣。
- E. 把生理鹽水沖洗注射器接上 IV 靜脈輸注導管的無針接頭，再順時針扭轉，直至牢固連接。(參閱圖 4)
- F. 打開 IV 靜脈輸注導管和/或 IV 靜脈輸注延長裝置的夾子。
- G. 利用「間歇」法沖洗 IV 靜脈輸注導管。方法如下：請推少量液體，暫停 2 至 3 秒，然後重複至輸注完規定的量。

如遇阻力請勿強行沖洗；請致電護士或藥劑師。

- H. 關閉 IV 靜脈輸注導管和/或 IV 靜脈輸注延長裝置的夾子。
- I. 取下使用完的生理鹽水沖洗注射器，並棄置於垃圾桶。

4 | 施用藥物

- A. 用酒精擦拭布擦拭 IV 靜脈輸注導管的無針接頭至少 15 秒，然後風乾。(參閱圖 3)
- B. 取下給藥輸注管的保護蓋。(參閱圖 5)
- C. 將藥物輸注管牢固連接到 IV 靜脈輸注導管的無針接頭。推入後順時針扭轉，直至牢固連接。(參閱圖 6)
- D. 打開 IV 靜脈輸注導管和/或 IV 靜脈輸注延長裝置的夾子。
- E. 打開給藥輸注管的夾子。
- F. 如果裝置製造商要求用膠帶貼到皮膚，請利用提供的膠帶，並確保限流器直接貼在皮膚。請勿用任何膠帶或材料覆蓋過濾器。(參閱下頁圖 7)

製造商指引可能有所不同。



4 | 藥物施打 續...

- G. 藥球排空後（已變扁），關閉給藥輸注管的夾子。
- H. 從 IV 靜脈輸注導管的無針接頭拆下給藥輸注管。
- I. 關閉 IV 靜脈輸注導管和/或 IV 靜脈輸注延長裝置的夾子。
- J. 按指示棄置藥球。

如果 30 分鐘後裝置未變扁，請檢查確保所有夾子均已打開。如未成功解決問題，請聯絡您的護士或藥劑師。

5 | 用生理鹽水沖洗 IV 靜脈輸注管

- A. 用酒精擦拭布擦拭 IV 靜脈輸注導管的無針接頭至少 15 秒，然後風乾。（參閱圖 3）
- B. 推動生理鹽水沖洗注射器的柱塞以打開封口。
- C. 取下生理鹽水沖洗注射器的保護蓋。
請勿在取下蓋子後觸碰注射器頭。

如果生理鹽水沖洗注射器的無菌頭在未蓋蓋子的情況觸碰任何不乾淨的表面，請棄置此注射器。

- D. 豎起注射器，輕推柱塞以排出注射器的空氣。
- E. 把生理鹽水沖洗注射器接上 IV 靜脈輸注導管的無針接頭，再順時針扭轉，直至牢固連接。（參閱圖 4）
- F. 打開 IV 靜脈輸注導管和/或 IV 靜脈輸注延長裝置的夾子。
- G. 利用「間歇」法沖洗 IV 靜脈輸注導管。方法如下：請推少量液體，暫停 2 至 3 秒，然後重複至輸注完規定的量。

如遇阻力請勿強行沖洗；請致電護士或藥劑師。

- H. 關閉 IV 靜脈輸注導管和/或 IV 靜脈輸注延長裝置的夾子。
- I. 取下用完的生理鹽水沖洗注射器，並棄置於垃圾桶。



6 | 用肝素沖洗 IV 靜脈輸注管（如有醫囑）

- A. 用酒精擦拭布擦拭 IV 靜脈輸注導管的無針接頭至少 **15 秒**，然後風乾。（參閱圖 3）
- B. 推動肝素沖洗注射器的柱塞以打開封口。
- C. 取下肝素沖洗注射器的保護蓋。
請勿在取下蓋子後觸碰注射器頭。

如果肝素沖洗注射器的無菌頭在未蓋蓋子的情況觸碰任何不乾淨的表面，請棄置此注射器。

- D. 豎起注射器，輕推柱塞以排出注射器的空氣。
- E. 把肝素沖洗注射器推入 IV 靜脈輸注導管的無針接頭，再順時針扭轉，直至牢固連接。（參閱圖 4）
- F. 打開 IV 靜脈輸注導管和/或 IV 靜脈輸注延長裝置的夾子。
- G. 利用「間歇」法沖洗 IV 靜脈輸注導管。方法如下：請推少量液體，暫停 **2 至 3 秒**，然後重複至輸注完規定的量。

如遇阻力請勿強行沖洗；請致電護士或藥劑師。

- H. 關閉 IV 靜脈輸注導管和/或 IV 靜脈輸注延長裝置的夾子。
- I. 取下用完的肝素沖洗注射器，並棄置於垃圾桶。

如有任何疑問或疑慮，請致電您的護士或醫師

您的 Option Care Health 團隊全年無休隨時待命為您效勞。



想要觀看教學影片並獲取其他教育資源，
請造訪 optioncarehealth.com/education。

