

# 施用腸內營養： 重力 - 僅供應急使用

請參閱「患者腸內  
營養指南」手冊，  
瞭解其他資訊。

本資訊目的不在取代專業建議。  
請遵照醫師、護士、藥劑師或  
營養師給您的治療建議。

腸內營養飼泵的內置電池應能持續供電 12 至 18 小時，具體取決於餵飼的速度和持續時間。

盡可能保持電池滿電並節約使用電池。在長時間停電或泵發生故障時，請遵照指示進行重力餵飼。請務必將重力套件隨其他應急用品一起存放。


請在停電並且無法給泵充電時使用重力袋。  
如果您沒有應急重力飼袋或需要補換袋子，請聯絡您本地的 Option Care Health 辦公室。

## 準備開始


- 準備您的配方食物和用品，放在乾淨的工作區域
- 使用肥皂和溫水徹底清潔雙手至少 **20 秒**  
(如果沒有肥皂和水，請使用含酒精的手部滅菌劑)
- 用乾淨的毛巾擦乾雙手

## 應急重力餵飼步驟

1. 按照指示用水慢慢沖洗飼管。(參閱圖 1)
2. 確保重力袋管子的滾輪夾處於「關」或下的位置。
3. 將重力袋掛在 IV 靜脈輸注架，打開蓋子，裝入指定量的配方食物。  
(參閱圖 2) 蓋緊蓋子，從管子末端取下透明塑膠套。(參閱圖 3)
4. 慢慢將滾輪夾打開到「開」或上的位置，讓配方案物流經管子，直至到達末端以灌注管子，然後再次關閉滾輪夾。
5. 連接重力袋的末端到飼管，慢慢將滾輪夾打開到「開」或上的位置。

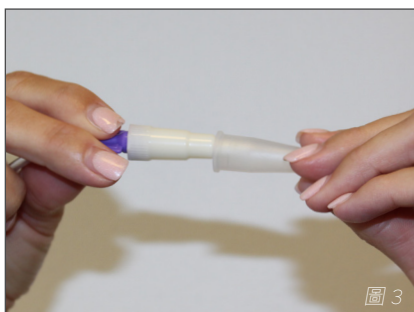

# 施用腸內營養：重力 - 僅供應急使用

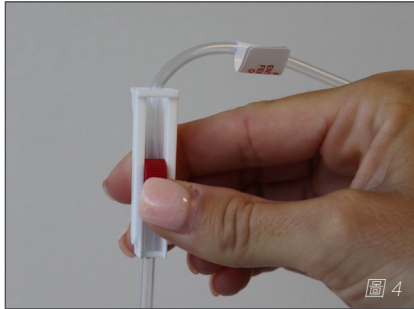

6. 向上或向下調整滾輪夾的位置，可以控制餵飼的流量。(參閱圖 4)
7. 一旦餵飼完成，取下重力袋，按指示使用注射器用水慢慢沖洗餵管。
8. 在兩次餵飼之間，使用溫水徹底沖洗重力袋。重力袋通常在 24 小時後棄置。

對於小兒患者或警覺性降低的成人患者，照護者務必密切監控重力餵飼，確保餵飼速度不能太快。

如有任何疑問或疑慮，  
請致電您的護士或醫師



您的 Option Care Health 團隊全年無休隨時待命  
為您效勞。

想要觀看教學影片並獲取其他教育資源，  
請造訪 [optioncarehealth.com/education](https://optioncarehealth.com/education)。