

# Внутривенное (в/в) введение лекарственного препарата: эластомерный насос

Данная информация не предназначена для использования вместо профессиональных рекомендаций.

Поэтому выполняйте рекомендации своего врача, медсестры или фармацевта.

## Перед применением

- Посмотрите на этикетке лекарственного препарата, когда нужно доставать лекарственный препарат из холодильника.
- **НИКОГДА** не ускоряйте процесс размораживания лекарственных препаратов, подогревая их различными способами, в том числе в микроволновой печи.
- Подготовьте чистое рабочее место.
- Тщательно вымойте руки теплой водой и мылом в течение **20 СЕКУНД** (если мыло и вода недоступны, используйте антисептик для рук на спиртовой основе).
- Вытрите руки насухо чистым полотенцем.

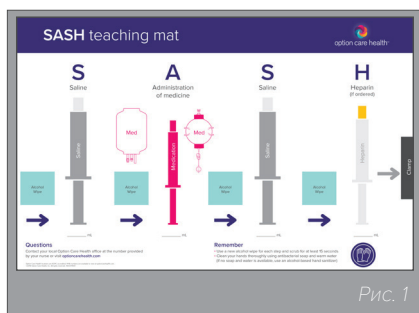


Рис. 1

## 1 | Подготовьте необходимые принадлежности и коврик SASH в соответствии с указаниями:

- A. Коврик SASH (см. рис. 1).
- B. Баллон с лекарственным препаратом для в/в введения.
- C. (2) промывочных шприца с солевым раствором.
- D. (1) промывочный шприц с гепарином (если назначено).
- E. Спиртовые салфетки.
- F. Контейнер для острых предметов и (или) контейнер для мусора.

## 2 | Осмотрите баллон с лекарственным препаратом

Внимательно прочитайте этикетку на баллоне (см. рис. 2) и проверьте правильно ли указаны:

- A. Имя и фамилия пациента.
- B. Название лекарственного препарата.
- C. Объем/количество лекарственного препарата.
- D. Время, необходимое для нагревания препарата до комнатной температуры.
- E. Срок годности лекарственного препарата.

В баллоне не должно быть трещин, он не должен протекать, в содержимом не должно быть плавающих частиц, цвет содержимого не должен быть изменен. В случае выявления проблем с баллоном с лекарственным препаратом или неправильных сведений на этикетке позвоните своей медсестре или фармацевту.

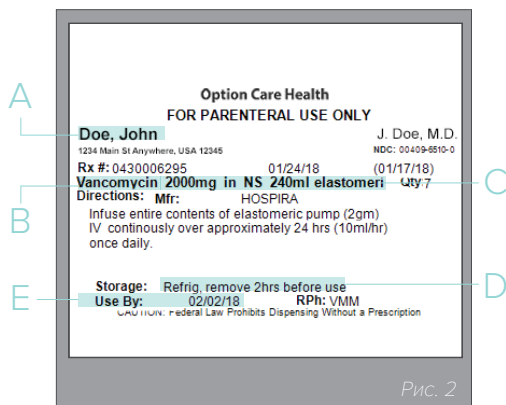


Рис. 2

Изображение приводится только в демонстрационных целях. Выполняйте инструкции на этикетке ВАШЕГО баллона с лекарственным препаратом.



Рис. 3



Рис. 4



Рис. 5



Рис. 6

## 3 | Промойте инфузионную линию солевым раствором

- A. Протрите безыгольный коннектор на в/в катетере спиртовой салфеткой в течение не менее **15 СЕКУНД** и дайте ему высохнуть на воздухе (см. рис. 3).
- B. Надавите на шток поршня промывочного шприца с солевым раствором, чтобы разорвать пломбу.
- C. Снимите защитный колпачок с промывочного шприца с солевым раствором.  
**НЕ** прикасайтесь к кончику шприца после снятия колпачка.

**Выбросьте промывочный шприц с солевым раствором, если стерильный кончик без колпачка коснется к каким-либо неочищенным поверхностям.**

- D. Удерживая шприц в вертикальном положении, слегка надавите на шток поршня, чтобы выпустить воздух из шприца.
- E. Подсоедините промывочный шприц с солевым раствором к безыгольному коннектору на в/в катетере путем надавливания и закручивания по часовой стрелке до полного соединения друг с другом (см. рис. 4).
- F. Откройте зажим на в/в катетере и (или) удлинительной инфузионной линии.
- G. Промойте в/в катетер, используя технику «надавливание/пауза». Для этого введите небольшое количество жидкости, сделайте паузу на **2–3 СЕКУНДЫ** и повторяйте эту последовательность действий до тех пор, пока не введете назначенное количество.

**НЕ пытайтесь промывать катетер в случае наличия сопротивления; позвоните медсестре или фармацевту.**

- H. Закройте зажим на в/в катетере и (или) удлинительной инфузионной линии.
- I. После использования отсоедините и выбросьте шприц для промывки солевым раствором в контейнер для мусора.

## 4 | Введение лекарственного препарата

- A. Протрите безыгольный коннектор на в/в катетере спиртовой салфеткой в течение не менее **15 СЕКУНД** и дайте ему высохнуть на воздухе (см. рис. 3).
- B. Снимите защитный колпачок с инфузионной системы (см. рис. 5).
- C. Надежно присоедините инфузионную систему с лекарственным препаратом к безыгольному коннектору на в/в катетере. Делайте это путем надавливания и закручивания по часовой стрелке до полного соединения (см. рис. 6).
- D. Откройте зажим на в/в катетере и (или) удлинительной инфузионной линии.
- E. Откройте зажим на инфузионной системе с лекарственным препаратом.
- F. Используя прилагаемый лейкопластырь, закрепите ограничитель потока непосредственно на коже. Не закрывайте фильтр лейкопластырем или другим материалом. (См. рис. 7 на следующей странице.)



### 4 | Введение лекарственного препарата

*Продолжение...*

- G. Когда баллон для лекарственного препарата опустеет (сдуется), закройте зажим на инфузионной системе.
- H. Отсоедините инфузионную систему от безыгольного коннектора на в/в катетере.
- I. Закройте зажим на в/в катетере и (или) удлинительной инфузионной линии.
- J. Утилизируйте баллон в соответствии с указаниями.

Если по истечении 30 минут устройство не сдувается, убедитесь в том, что зажимы открыты. Если это не помогло, обратитесь к медсестре или фармацевту.

### 5 | Промойте инфузионную линию солевым раствором

- A. Протрите безыгольный коннектор на в/в катетере спиртовой салфеткой в течение не менее **15 СЕКУНД** и дайте ему высохнуть на воздухе (см. рис. 3).
- B. Надавите на шток поршня промывочного шприца с солевым раствором, чтобы разорвать пломбу.
- C. Снимите защитный колпачок с промывочного шприца с солевым раствором.  
**НЕ** прикасайтесь к кончику шприца после снятия колпачка.

Выбросьте промывочный шприц с солевым раствором, если стерильный кончик без колпачка коснется к каким-либо неочищенным поверхностям.

- D. Удерживая шприц в вертикальном положении, слегка надавите на шток поршня, чтобы выпустить воздух из шприца.
- E. Подсоедините промывочный шприц с солевым раствором к безыгольному коннектору на в/в катетере путем надавливания и закручивания по часовой стрелке до полного соединения друг с другом (см. рис. 4).
- F. Откройте зажим на в/в катетере и (или) удлинительной инфузионной линии.
- G. Промойте в/в катетер, используя технику «надавливание/пауза». Для этого введите небольшое количество жидкости, сделайте паузу на **2–3 СЕКУНДЫ** и повторяйте эту последовательность действий до тех пор, пока не введете назначенное количество.

**НЕ** пытайтесь промывать катетер в случае наличия сопротивления; позвоните медсестре или фармацевту.

- H. Закройте зажим на в/в катетере и (или) удлинительной инфузионной линии.
- I. После использования отсоедините и выбросьте шприц для промывки солевым раствором в контейнер для мусора.



## **6 | Промойте инфузионную линию гепарином** (если назначено)

- A.** Протрите безыгольный коннектор на в/в катетере спиртовой салфеткой в течение не менее **15 СЕКУНД** и дайте ему высохнуть на воздухе (см. рис. 3).
- B.** Надавите на шток поршня промывочного шприца с гепарином, чтобы разорвать пломбу.
- C.** Снимите защитный колпачок с промывочного шприца с гепарином.  
**НЕ** прикасайтесь к кончику шприца после снятия колпачка.

**Выбросьте промывочный шприц с гепарином, если стерильный кончик без колпачка прикоснется к каким-либо неочищенным поверхностям.**

- D.** Удерживая шприц в вертикальном положении, слегка надавите на шток поршня, чтобы выпустить воздух из шприца.
- E.** Подсоедините промывочный шприц с гепарином к безыгольному коннектору путем надавливания и закручивания по часовой стрелке до полного соединения друг с другом (см. рис. 4).
- F.** Откройте зажим на в/в катетере и (или) удлинительной инфузионной линии.
- G.** Промойте в/в катетер, используя технику «надавливание/пауза». Для этого введите небольшое количество жидкости, сделайте паузу на **2–3 СЕКУНДЫ** и повторяйте эту последовательность действий до тех пор, пока не введете назначенное количество.

**НЕ пытайтесь промывать катетер в случае наличия сопротивления; позвоните медсестре или фармацевту.**

- H.** Закройте зажим на в/в катетере и (или) удлинительной инфузионной линии.
- I.** После использования отсоедините и выбросьте шприц для промывки гепарином в контейнер для мусора.

Со всеми вопросами и проблемами обращайтесь к медсестре или врачу

Ваша группа медицинских специалистов из Option Care Health готова предоставить помощь по телефону в режиме 24/7/365.



Чтобы посмотреть видеоинструкции или ознакомиться с дополнительными учебно-просветительскими ресурсами, посетите веб-сайт [optioncarehealth.com/education](https://optioncarehealth.com/education).

Отделения Option Care Health аккредитованы Комиссией по аккредитации медицинских учреждений (Accreditation Commission for Health Care, ACHC). Номера организаций по медицинскому обслуживанию на дому (Home Health Agencies, HHA) можно посмотреть на веб-сайте [optioncarehealth.com](https://optioncarehealth.com).

© Option Care Health, Inc., 2022 г. Все права защищены. 200CH11008-0422



option care health®