

Administración de medicamentos por vía intravenosa: bolsita con vial conectado mediante gravedad

Esta información no pretende sustituir el asesoramiento profesional. Por lo tanto, siga las recomendaciones de su médico, personal de enfermería o farmacéutico.

Antes de usar

- Use un área de trabajo limpia
- Lávese muy bien las manos con jabón y agua tibia durante al menos **20 SEGUNDOS**
(si no hay agua y jabón disponibles, use un desinfectante de manos a base de alcohol)
- Séquese las manos con una toalla limpia

1 | Reúna los suministros y prepare el equipo SASH, según las indicaciones:

- Equipo SASH (Véase la Figura 1)
- Bolsa de medicamento intravenoso
- Tubo intravenoso *(puede usarse por 24 horas)*
- Portasueros
- (2) jeringas de irrigación con solución salina
- (1) jeringa de irrigación con heparina *(si se prescribió)*
- Paños de alcohol
- Contenedor de instrumentos punzantes y/o contenedor de basura

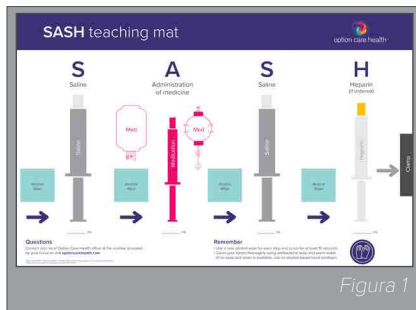


Figura 1

2 | Inspeccione la bolsa del medicamento

Consulte la etiqueta en la bolsa (Véase la Figura 2) y verifique los siguientes datos:

- Nombre correcto del paciente
- Nombre correcto del medicamento
- Volumen/cantidad del medicamento
- Instrucciones de almacenamiento
- “Fecha de vencimiento” del medicamento

La bolsa del medicamento no debe tener fugas, partículas flotantes ni decoloración. Llame al personal de enfermería o farmacéutico si tiene problemas con la bolsa del medicamento o si la información de la etiqueta es incorrecta.




Figura 2

Para fines de demostración, siga las instrucciones que se indican en la bolsa de SU medicamento.

1 | Su equipo de Option Care Health está disponible para ayudarlo las 24 horas del día, los 7 días de la semana

 option care health®

Administración de medicamentos por vía intravenosa: bolsita con vial conectado mediante gravedad

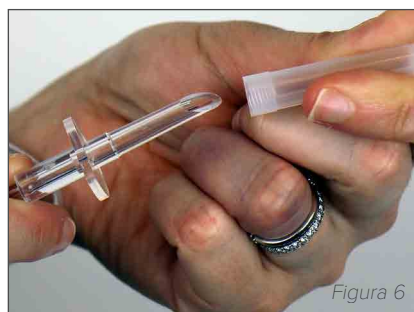

3 | Prepare el medicamento intravenoso

- Doble hacia arriba y luego hacia abajo para liberar la presión del vial de medicamento en la tapa de color azul claro. (Véase la Figura 3)
- Sostenga la bolsa de medicamento con el vial hacia abajo.
- Apriete para verter la solución en el vial hasta que esté medio lleno.
- Mezcle suavemente la solución para disolver el medicamento.
- Sostenga la bolsa de medicamento con el vial boca abajo. (Véase la Figura 4)
- Apriete la bolsa para forzar el ingreso de aire al vial.
- Suelte la bolsa para drenar el medicamento mezclado del vial.

Repita estos pasos hasta que el vial ya no contenga residuo alguno de medicamento y solución. Asegúrese de que el medicamento esté completamente disuelto. **NO** retire el vial de medicamento.

4 | Prepare el tubo intravenoso

- Saque el tubo intravenoso del empaque.
- Cierre la abrazadera del tubo intravenoso.
- Coloque la bolsa de medicamento sobre una superficie limpia y plana.
- Retire la pestaña de la bolsa de medicamento. (Véase la Figura 5)
- Retire la tapa de la espiga del tubo. (Véase la Figura 6) **NO** toque el extremo del tubo.
- Pinche la bolsa empujando y girando el extremo del tubo en la bolsa. (Véase la Figura 7) Asegúrese de que la punta alcance el medicamento de la bolsa y tenga cuidado de no perforarla. (Véase la Figura 8)
- Cuelgue el contenedor de medicamento intravenoso en el portasueros. Apriete suavemente la cámara cuentagotas hasta que el líquido llegue a la mitad. **NO** la sobrecargue. (Véase la Figura 9)
- Abra lentamente la abrazadera para llenar el tubo con el medicamento.
- Cuando el medicamento llegue al extremo del tubo, cierre la abrazadera.



Administración de medicamentos por vía intravenosa: bolsita con vial conectado mediante gravedad



Figura 10



Figura 11

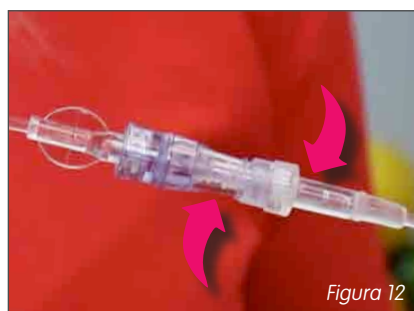


Figura 12

5 | Irrigue la vía intravenosa con solución salina

- Frote el conector sin aguja del catéter intravenoso con un paño de alcohol durante al menos **15 SEGUNDOS** y déjelo secar al aire.
(Véase la Figura 10)
- Empuje el émbolo de la jeringa de irrigación con solución salina para romper el sello.
- Retire la tapa protectora de la jeringa con solución salina.
NO toque la punta de la jeringa después de quitar la tapa.

Deseché la jeringa de irrigación con solución salina si la punta estéril destapada toca alguna superficie sucia.

- Sostenga la jeringa en posición vertical y empuje suavemente el émbolo para extraer el aire de la jeringa.
- Coloque la jeringa de irrigación con solución salina en el conector sin aguja del catéter intravenoso, empujando y girando en el sentido de las agujas del reloj hasta que estén unidos. *(Véase la Figura 11)*
- Abra la abrazadera del catéter intravenoso y/o del equipo de extensión intravenoso.
- Irrigue el catéter intravenoso con el método de “empujar y hacer una pausa” repetidas veces. Para hacer esto, haga fluir una cantidad pequeña de líquido, haga una pausa de **2 A 3 SEGUNDOS** y repita hasta que la cantidad prescrita se infunda.

NO intente vaciarla si siente resistencia. Llame al personal de enfermería o farmacéutico.

- Cierre la abrazadera del catéter intravenoso y/o del equipo de extensión intravenoso.
- Retire la jeringa de irrigación con solución salina y deséchela en el contenedor de basura después de usarla.

6 | Administración del medicamento

- Frote el conector sin aguja del catéter intravenoso con un paño de alcohol durante al menos **15 SEGUNDOS** y déjelo secar al aire.
(Véase la Figura 10)
- Retire la tapa protectora del tubo intravenoso.
- Conecte con firmeza el tubo de medicamentos al conector sin aguja en el catéter intravenoso. Empuje y gire en el sentido de las agujas del reloj hasta que estén unidos. *(Véase la Figura 12)*
- Abra la abrazadera del catéter intravenoso y/o del equipo de extensión intravenoso. *(A medida que se administra el medicamento, deberían verse gotas cayendo en la cámara cuentagotas. La frecuencia de goteo es _____ gotas cada 15 segundos. Ajuste la frecuencia utilizando la abrazadera según sea necesario).*
- Abra la abrazadera del tubo de medicamentos.
- Una vez que se haya infundido la dosis, cierre la abrazadera del tubo intravenoso.
- Cierre la abrazadera del catéter intravenoso y/o del equipo de extensión intravenoso.

Administración de medicamentos por vía intravenosa: bolsita con vial conectado mediante gravedad

6 | Administración del medicamento *Continuación*

- H. Desconecte el tubo intravenoso del catéter.
- I. Deseche todo el equipo en el contenedor de basura.

Si debe volver a usar el tubo dentro de las siguientes 24 horas, cubra la punta expuesta del tubo intravenoso con la tapa estéril provista.

7 | Irrigue la vía intravenosa con solución salina

- A. Frote el conector sin aguja del catéter intravenoso con un paño de alcohol durante al menos **15 SEGUNDOS** y déjelo secar al aire.
(Véase la Figura 10)
- B. Empuje el émbolo de la jeringa de irrigación con solución salina para romper el sello.
- C. Retire la tapa protectora de la jeringa con solución salina.
NO toque la punta de la jeringa después de quitar la tapa.

Deseche la jeringa de irrigación con solución salina si la punta estéril destapada toca alguna superficie sucia.

- D. Sostenga la jeringa en posición vertical y empuje suavemente el émbolo para extraer el aire de la jeringa.
- E. Coloque la jeringa de irrigación con solución salina en el conector sin aguja del catéter intravenoso, empujando y girando en el sentido de las agujas del reloj hasta que estén unidos. *(Véase la Figura 11)*
- F. Abra la abrazadera del catéter intravenoso y/o del equipo de extensión intravenoso.
- G. Irrigue el catéter intravenoso con el método de “empujar y hacer una pausa” repetidas veces. Para hacer esto, haga fluir una cantidad pequeña de líquido, haga una pausa de **2 A 3 SEGUNDOS** y repita hasta que la cantidad prescrita se infunda.

NO intente vaciarla si siente resistencia. Llame al personal de enfermería o farmacéutico.

- H. Cierre la abrazadera del catéter intravenoso y/o del equipo de extensión intravenoso.
- I. Retire la jeringa y deséchela en el contenedor de basura después de usarla.

Administración de medicamentos por vía intravenosa: bolsita con vial conectado mediante gravedad

8 | Irrigue la vía intravenosa con heparina

(si se prescribió)

- A. Frote el conector sin aguja del catéter intravenoso con un paño de alcohol durante al menos **15 SEGUNDOS** y déjelo secar al aire. *(Véase la Figura 10)*
- B. Empuje el émbolo de la jeringa de irrigación con heparina para romper el sello.
- C. Retire la tapa protectora de la jeringa de irrigación con heparina. **NO** toque la punta de la jeringa después de quitar la tapa.

Deseché la jeringa de irrigación con heparina si la punta estéril destapada toca alguna superficie sucia.

- D. Sostenga la jeringa en posición vertical y empuje suavemente el émbolo para extraer el aire de la jeringa.
- E. Coloque la jeringa de irrigación con heparina en el conector sin aguja del catéter intravenoso, empujando y girando en el sentido de las agujas del reloj hasta que estén unidos. *(Véase la Figura 11)*
- F. Abra la abrazadera del catéter intravenoso y/o del equipo de extensión intravenoso.
- G. Irrigue el catéter intravenoso con el método de “empujar y hacer una pausa” repetidas veces. Para hacer esto, haga fluir una cantidad pequeña de líquido, haga una pausa de **2 A 3 SEGUNDOS** y repita hasta que la cantidad prescrita se infunda.

NO intente vaciarla si siente resistencia. Llame al personal de enfermería o farmacéutico.

- H. Cierre la abrazadera del catéter intravenoso y/o del equipo de extensión intravenoso.
- I. Retire la jeringa de irrigación con heparina y deséchela en el contenedor de basura después de usarla.

Llame al personal de enfermería o al médico si tiene preguntas o inquietudes

Su equipo de Option Care Health está disponible para ayudarlo las 24 horas del día, los 7 días de la semana.



Visite optioncarehealth.com/education para ver las instrucciones en vídeo y acceder a recursos educativos adicionales.

Los centros de Option Care Health cuentan con acreditación de la Comisión de Acreditación para la Atención de la Salud (ACHC, por sus siglas en inglés). Los números de HHA están disponibles en optioncarehealth.com.

©2022 Option Care Health, Inc. Todos los derechos reservados. 200CH11011-0422

