
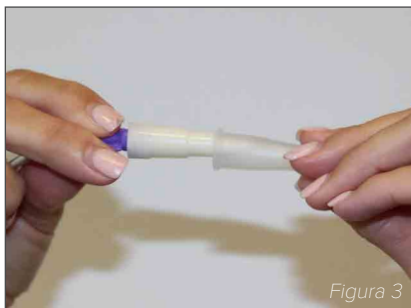


Administración de nutrición enteral: Por gravedad: únicamente para uso en caso de emergencia

Consulte el folleto de la “Guía del paciente sobre nutrición enteral” para obtener más información.

Esta información no pretende sustituir el asesoramiento profesional. Siga las recomendaciones de su médico, personal de enfermería, farmacéutico o nutricionista en relación con su terapia.

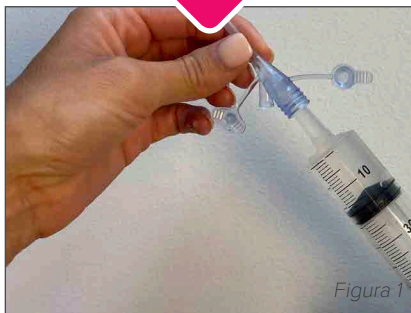

La batería interna de su bomba de nutrición enteral debería mantener la carga por 12 o 18 horas, dependiendo de la frecuencia y duración de su alimentación.

Mantenga la batería con carga completa, y ahorre batería cuando sea posible. Siga estas instrucciones de alimentación por gravedad en caso de un corte de energía prolongado o mal funcionamiento de la bomba. Almacene siempre el (los) set(s) de administración por gravedad en el mismo lugar en el que mantiene sus suministros de emergencia.

En caso de un apagón y de que no pueda cargar su bomba, utilice bolsas por gravedad. Si no tiene acceso a una bolsa por alimentación de emergencia o necesita una bolsa de reemplazo, comuníquese con la oficina local de Option Care Health.

Para comenzar

- Reúna la fórmula y los suministros, y colóquelos en un área de trabajo limpia
- Lávese muy bien las manos con jabón y agua tibia durante al menos **20 segundos** (si no hay agua y jabón disponibles, use un desinfectante de manos a base de alcohol)
- Séquese las manos con una toalla limpia

Pasos de la alimentación por gravedad en caso de emergencia

1. Irrigue lentamente la sonda de alimentación con agua, según las indicaciones. (Véase la Figura 1)
2. Asegúrese de que la abrazadera de rodillo en la sonda de la bolsa por gravedad está en la posición “Off” o hacia abajo.
3. Cuelgue la bolsa por gravedad en el portasueros, abra la tapa y llénela con la cantidad indicada de fórmula. (véase la Figura 2). Cierre la tapa y retire la cubierta de plástico transparente del extremo de la sonda. (Véase la Figura 3)
4. Abra lentamente la abrazadera de rodillo a la posición “On” o hacia arriba y prepare la sonda, permitiendo que la fórmula se mueva a través de ella hasta que alcance el extremo. Luego, vuelva a cerrar la abrazadera de rodillo.
5. Conecte el extremo de la bolsa por gravedad a la sonda de alimentación y abra lentamente la abrazadera de rodillo a la posición “On” o hacia arriba.

1 | Su equipo de Option Care Health está disponible para ayudarlo las 24 horas del día, los 7 días de la semana


option care health®

Administración de nutrición enteral:

Por gravedad: únicamente para uso en caso de emergencia



Figura 4

6. Puede controlar el flujo de alimentación ajustando la posición de la abrazadera de rodillo hacia arriba o hacia abajo. (Véase la Figura 4)
7. Una vez se complete el proceso de alimentación, desconecte la bolsa por gravedad y use la jeringa para irrigar lentamente la sonda de alimentación con agua según las indicaciones.
8. Irrigue cuidadosamente la bolsa por gravedad con agua tibia después de cada uso. Generalmente, las bolsas por gravedad son desechadas después de 24 horas.

En el caso de pacientes pediátricos o adultos con bajos niveles de alerta, es importante que el cuidador monitoree de cerca la alimentación por gravedad para asegurarse de que el flujo de alimentación no vaya demasiado rápido.

Llame al personal de enfermería o médico si tiene preguntas o inquietudes



Su equipo de Option Care Health está disponible para ayudarlo las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Visite optioncarehealth.com/education para ver las instrucciones en vídeo y acceder a recursos educativos adicionales.

Los centros de Option Care Health cuentan con acreditación de la Comisión de Acreditación para la Atención de la Salud (ACHC, por sus siglas en inglés). Los números de HHA están disponibles en optioncarehealth.com.

©2020 Option Care Health, Inc. Todos los derechos reservados. 200CH11024

